



Soft Rebase

Soft Rebase TDV é uma resina autopolimerizável (pó e líquido), desenvolvida para rebaseamento macio de uso prolongado, o que proporciona ao paciente um maior tempo de adaptação às próteses totais. Sua formulação permite a manutenção do estado macio por até 09 meses protegendo o paciente em áreas sensíveis. Pode ser rebaseada diretamente na boca do paciente, pois a polimerização não gera calor e o monômero não causa irritação à mucosa oral. Soft Rebase TDV atende aos requisitos da ISO 20795-1, Tipo 2, Classe 1, garantindo resultados de alta qualidade. O produto encontra-se disponível nas cores incolor e rosa. O kit acompanha Glaze e medidores. O Glaze é indicado para impermeabilizar, dar brilho e proteger o acrílico contra pigmentação e impregnação de bactérias. Glaze: Indicado para impermeabilização da resina, promovendo brilho e proteção contra pigmentação e acúmulo de bactérias, uma vez que sela a superfície porosa das peças.

Indicação: Indicada para rebaseamento de próteses totais e parciais removíveis, moldagens funcionais, rebaseamentos de placas e aparelhos ortodônticos e confecção de gengiva artificial nos modelos de implante. Absorve a carga mastigatória que é incidida sobre a prótese total ou parcial, distribuindo-a de uma maneira uniforme pelos tecidos de suporte, isso gera menor tensão sobre a base dura da prótese e evita áreas localizadas de concentração de tensão sobre o rebordo alveolar. Soft Rebase TDV também é indicada para rebaseamento de áreas cirúrgicas em recondicionamento tecidual, póis implantes e cirurgias, com o objetivo de maior proteção desses tecidos. No entanto, para áreas cirúrgicas que requerem maiores cuidados dos tecidos e implantes recomenda-se o uso da resina Soft Provisório TDV.

Uso: Rebaseamento de prótese, aparelho ortodôntico e placas - Preparo: Fazer um alívio interno da prótese a ser rebaseada, removendo aproximadamente 1,5mm de resina com o auxílio de dispositivo de acabamento de baixa rotação. Limpar e secar bem a peça. No caso de próteses, recobrir as superfícies dos dentes, gengival e palatina, com isolante. Não aplicar recobrimento a mais de 3mm da borda periférica. **Mistura da resina:** Agitar o frasco de pó antes do uso. Colocar inicialmente o líquido no pote Dappen, adicionando em seguida o pó, gradativamente. A proporção dos componentes da resina Soft Rebase TDV é de 2 partes de pó para 1 parte de líquido (v/v). Misturar no máximo por 30 segundos, evitando a formação de bolhas (recomenda-se utilizar espátula nº 36). Aguardar a fase plástica para aplicação na peça.

Aplicação em prótese: Espalhar a resina Soft Rebase TDV sobre a área a ser rebaseada. Inserir a prótese na boca do paciente e pedir que feche a boca suavemente até a oclusão. Esperar 3 minutos e pedir para o paciente mover os lábios e os maxilares a fim de obter uma adaptação muscular na periferia. Retirar a prótese da boca do paciente e enxagüá-la com água fria. Remover o excesso de material. Inserir novamente a prótese na boca do paciente e pedir que feche firmemente a boca em oclusão, mantendo esta posição durante 5 minutos. Retirar a prótese da boca do paciente e enxagüá-la com água fria. **Aplicação em aparelho ortodôntico e placas:** Espalhar a resina Soft Rebase TDV sobre a área a ser rebaseada. Inserir a peça na boca do paciente mantendo a peça em posição por 4 minutos. Retirar a peça da boca do paciente e enxagüá-la com água fria. Remover o excesso de material. **Acabamento e polimento:** Após o término da polimerização, realizar o acabamento de forma convencional. Recomenda-se utilizar uma broca de tungstênio e, em seguida, uma lixa para uniformizar a superfície. Limpar a peça com água e detergente e secar bem toda a superfície usando ar comprimido isento de óleo. Realizar o polimento com o auxílio de pasta de polimento ou borrachas abrasivas. Aplicar de duas a três camadas de glaze sobre a peça. Aguardar de 2 a 3 minutos. Lavar a peça com água e detergente. No caso das próteses totais ou parciais, não passar o glaze sobre outras partes da prótese que não seja o material rebaseado.

Confecção de gengiva artificial nos modelos de implante - Preparo e mistura: Posicionar os análogos nos transferes de moldagem. Isolar o material de moldagem ao redor dos implantes. Agitar o frasco de pó antes do uso. Colocar inicialmente o líquido no pote Dappen, adicionando em seguida o pó, gradativamente. A proporção dos componentes da resina Soft Rebase TDV é de 2 partes de pó para 1 parte de líquido (v/v). Misturar no máximo por 30 segundos, evitando a formação de bolhas (recomenda-se utilizar espátula nº 36). Aguardar a fase plástica para aplicação. **Aplicação:** Espalhar a resina Soft Rebase TDV sobre a região do implante. Dé a forma com uma espátula utilizando auxílio do monômero. Aguardar 3 minutos para verter o gesso. **Para moldagens funcionais:** Agitar o frasco de pó antes do uso. Colocar inicialmente o líquido no pote Dappen, adicionando em seguida o pó, gradativamente. A proporção dos componentes da resina Soft Rebase TDV é de 2 partes de pó para 1 parte de líquido (v/v). Misturar no máximo por 30 segundos, evitando a formação de bolhas (recomenda-se utilizar espátula nº36). Aguardar a fase plástica para aplicação. Aplicar a resina na moldreira individual mantendo uma espessura uniforme. Levar a moldreira em boca e proceder a técnica de moldagem funcional. **Rebaseamento de áreas cirúrgicas em recondicionamento tecidual - Preparo:** Fazer um alívio interno na prótese, compatível com a região operada. Sugere-se um alívio adicional (margem de segurança) de 3 a 5mm para maior proteção tecidual. **Mistura e aplicação:** Proceder conforme orientações para rebaseamento de prótese geral. **Glaze:** Após acabamento da superfície, aplicar de duas a três camadas de glaze sobre a área que foi rebaseada. Aguardar de 2 a 3 minutos. Realizar o enxágue antes do uso. No caso de próteses total ou parcial, não passar o glaze sobre a resina termopolimerizável ou outras autopolimerizáveis.



Advertências, precauções e restrições:



PERIGO / ATENÇÃO

Somente para uso odontológico. Uso profissional. Manipular o produto em local ventilado, utilizando espátula, roupa de proteção, luvas descartáveis, óculos de proteção e máscara. Recomenda-se o manuseio do produto em temperatura ambiente (20°C a 25°C). Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico durante o manuseio. Os recipientes, instrumentos e as mãos devem estar isentos de contaminantes, para evitar a contaminação das peças e do paciente com microrganismos. Os recipientes, instrumentos, as peças e as mãos, devem estar isentos de cera ou gordura para obter uma adequada união química entre as resinas. Seguir as instruções de uso para evitar resíduos de monômero na peça fabricada, alteração de cor, desgaste acelerado ou quebra. O não cumprimento das instruções de uso pode afetar o desempenho do produto. Pode ocorrer pigmentação no glaze em pacientes fumantes. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. O manuseio deste produto não é recomendável para gestantes e lactantes. Não reutilizar as embalagens. Armazenar em local fechado à chave. **Resina:** Pode formar misturas ar/pó inflamáveis. **Disposição:** Os resíduos, conteúdo/recipiente devem ser dispostos em aterro industrial ou sanitário conforme legislação local vigente. Não descartar os resíduos em esgotos, cursos d' água ou lixo doméstico. A Ficha de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada por telefone. Produto inflamável. Temperatura de ignição do líquido: 421,4°C. Ponto de fulgor: 10°C. Conservar longe de qualquer fonte de ignição – Não fumar. **Líquido / Pó / Glaze / Kit:** Evite inalar as névoas, vapores e poeiras. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Retire toda a roupa contaminada e lave-a com água e sabão imediatamente. **Líquido / Pó / Kit:** Pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Evite a liberação para o meio ambiente. Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Recolha o material derramado. **Líquido / Glaze / Kit:** Líquido e vapores altamente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Mantenha afastado do calor, fumaça, chama aberta e superfícies quentes – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antiflâmicas. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Em caso de contato com a pele: (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico, dióxido de carbono (CO2), Halon, neblina d' água, ou espuma para álcool. **Pó / Glaze / Kit:** Pode provocar irritação das vias respiratórias. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um Centro de Intoxicação Toxicológica ou um médico. **Líquido / Kit:** Provoca irritação moderada à pele. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Em caso de exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. **Glaze / Kit:** Pode ser nocivo se ingerido. Pode provocar sonolência ou vertigem. Qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos

Armazenamento: Pó: Armazenar o produto em local seco, fresco, bem ventilado e ao abrigo da luz solar. **Líquido / Kit / Glaze:** Armazenar o produto em local seco, fresco, bem ventilado e ao abrigo da luz solar. Não armazenar em temperatura superior a 30°C (86°F).

Composição: Pó incolor: Polimetacrilato. **Pó rosa:** Polimetacrilato e pigmentos. **Líquido:** Metacrilatos, plastificante e iniciador. **Glaze:** Polimetacrilato, acetato de etila e essência.

Acessório: Medidores

Apresentação:

Código	Conteúdo	Código	Conteúdo
0012303400	Kit Soft Rebase 30g - Rosa	0012303416	Kit Soft Rebase 120g - Rosa
0012303401	Kit Soft Rebase 30g - Incolor	0012303417	Kit Soft Rebase 120g - Incolor



Soft Rebase

Soft Rebase TDV es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) desarrollada para rebase blando de uso prolongado, brindando al paciente un mayor tiempo y una adaptación confortable a la prótesis. Su formulación permite el mantenimiento del estado blando por hasta 9 meses, protegiendo el paciente en áreas sensibles. Puede ser aplicada directamente en la boca del paciente, pues su polimerización no genera calor y el monómero no causa irritación a la mucosa oral. Soft Rebase TDV atiende los requisitos de la norma ISO 20795-1, Tipo 2, Clase 1, garantizando resultados de alta calidad. El producto se encuentra disponible en los colores rosa e incolor. El kit acompaña Glaze y Medidores. El Glaze es indicado para impermeabilizar, dar brillo y proteger el acrílico contra la pigmentación e impregnación de bacterias. Glaze: Indicado para impermeabilización de la resina, brindando brillo y protección contra pigmentación y acúmulo de bacterias, una vez que sella la superficie porosa de las piezas.

Indicación: Indicada para rebase de prótesis totales y parciales removibles, moldados funcionales, rebase de placas y aparatos ortodónticos y encías artificiales en los modelos de implante. Absorbe la carga de la masticación que incide sobre la prótesis total o parcial, distribuyéndola de manera uniforme por los tejidos que la soportan, generando menor tensión sobre la base de la prótesis dura y evita las zonas localizadas de concentración de tensión sobre el reborde alveolar. Soft Rebase TDV también es indicada para el rebase de áreas quirúrgicas en recondicionamiento tisular, post implantes y cirugías, con el objetivo de garantizar mayor protección de esos tejidos. Sin embargo, para áreas quirúrgicas que requieren mayores cuidados de los tejidos e implantes se recomienda el uso de la resina Soft Provisorio 1 TDV.

Uso: Rebase de prótesis, aparato de ortodoncia y placas - Preparación: Hacer un alivio interno de la prótesis a ser rebaseada mediante la eliminación de aproximadamente 1,5 mm de resina con la ayuda de un dispositivo de acabado de baja rotación. Limpiar y secar bien la pieza. En el caso de prótesis, recubrir las superficies de los dientes, gingival y palatina, con aislante. No aplicar recubrimiento de más de 3mm del borde periférico. **Mezcla de la resina:** Agitar el frasco de polvo antes del uso. Colocar inicialmente el líquido en el vaso Dappen, añadiendo en seguida el polvo gradualmente. La proporción de los componentes de la resina Soft Rebase TDV es de 2 partes de polvo por 1 parte de líquido (v/v). Mezclar por un máximo de 30 segundos, evitando formación de burbujas (es recomendable el uso de una espátula nº 36). Aguardar la fase plástica para aplicación en la pieza. **Aplicación en prótesis:** Espalmar la resina Soft Rebase TDV sobre el área a ser recubierta. Insertar la prótesis en la boca del paciente y pedir que cierre la boca suavemente hasta alcanzar la oclusión. Esperar 3 minutos y pedir para el paciente mover los labios y los maxilares, como forma de alcanzar una adaptación muscular periférica. Retirar la prótesis de la boca del paciente y enjuagarla con agua fría. Remover el exceso de material. Insertar la prótesis nuevamente en la boca del paciente y pedir que cierre firmemente la boca en oclusión, manteniendo esta posición durante 5 minutos. Retirar la prótesis de la boca del paciente y enjuagarla con agua fría. **Aplicación en aparato de ortodoncia ortodóntico y placa:** Espalmar la resina Soft Rebase TDV sobre el área a ser recubierta. Insertar la pieza en la boca del paciente manteniendo la pieza en posición por 4 minutos. Retirar la pieza de la boca del paciente y enjuagarla con agua fría. Remover el exceso de material. **Acabado y pulido:** Después del término de la polimerización realizar el acabado de forma convencional. Es recomendable utilizar una fresa de tungsteno y, en seguida, un disco de lija para dejar uniforme la superficie. Limpiar la pieza con agua y detergente y secar bien toda la superficie usando aire comprimido libre de aceite. Realizar el pulido con pasta de pulido o gomas abrasivas. Aplicar de dos a tres capas de Glaze sobre la pieza. Esperar de 2 a 3 minutos. Lavar la pieza con agua y detergente. En el caso de prótesis total o parcial, no aplicar el glaze sobre otras partes de prótesis que no sean el material de rebase. **Confecção de encia artificial en los modelos de implante - Preparo y mezcla:** Posicionar los análogos en los postes de impresión. Aislar el material de impresión alrededor de los implantes. Agitar el frasco de polvo antes del uso. Colocar, inicialmente, el líquido en el vaso Dappen, añadiendo en seguida el polvo gradualmente. La proporción de los componentes de la resina Soft Rebase TDV es de 2 partes de polvo por 1 parte de líquido (v/v). Mezclar por lo máximo 30 segundos, evitando la formación de burbujas (se recomienda utilizar una espátula nº 36). Esperar la fase plástica para aplicación. **Aplicación:** Distribuir la resina Soft Rebase TDV sobre la región del implante. Dé la forma con una espátula utilizando un poco de monómero. Esperar 3 minutos para vaciar el yeso. **Para impresiones funcionales:** Agitar el frasco de polvo antes del uso. Colocar inicialmente el líquido en el vaso Dappen, añadiendo en seguida el polvo gradualmente. La proporción de los componentes de la resina Soft Rebase TDV es de 2 partes de polvo por 1 parte de líquido (v/v). Mezclar por lo máximo 30 segundos, evitando la formación de burbujas (se recomienda utilizar una espátula nº 36). Esperar la fase plástica para aplicación. Aplicar la resina en la cubeta individual manteniendo un espesor uniforme. Llevar el molde a la boca y hacer la técnica de impresión funcional. **Rebase de áreas quirúrgicas en recondicionamiento tisular - Preparación:** Hacer un alivio interno en la prótesis, compatible con la región afectada. Se sugiere un alivio adicional (margen de seguridad) de 3 a 5 mm para mayor protección tisular. **Mezcla y aplicación:** Proceder de acuerdo a las orientaciones para el rebase de prótesis general. **Glaze:** Después de realizado el acabado de la superficie, aplicar de dos a tres capas de Glaze sobre el área rebaseada. Aguardar de 2 a 3 minutos. Enjuague antes de usar. En los casos de prótesis totales o parciales, no se debe aplicar el Glaze en resinas termopolimerizables u otras resinas autopolimerizables.

Advertencias, precauciones y restricciones:



PELIGRO / ATENCIÓN

exclusivo para uso odontológico. Uso profesional. Manipular el producto en local ventilado, utilizando espátula, ropa de protección, guantes desechables de protección y tapa bocas. Se recomienda la manipulación del producto en temperatura ambiente (20°C a 25°C). Realizar los controles habituales para el control microbiológico durante la manipulación. Los recipientes, instrumentos y las manos deben estar libres de contaminantes para evitar la contaminación de las piezas y del paciente con microorganismos. Los recipientes, instrumentos, las piezas y las manos deben estar libres de cera o grasa para obtener una adecuada unión química entre las resinas. Seguir las instrucciones de uso para evitar residuos de monómero en la pieza rebasada, alteración de color, desgaste acelerado o rotura. El no cumplimiento de las instrucciones de uso puede afectar el desempeño del producto. Puede ocurrir pigmentación en el Glaze en pacientes fumadores. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. No es recomendable la manipulación de este producto por parte de gestantes y lactantes. No reutilizar los embalajes del producto. Conservar el envase herméticamente cerrado. **Resina:** Puede formar mezcla aire/powder inflamable. **Eliminación:** Los residuos, contenido/recipientes deben ser eliminados en basureros industriales o sanitarios, de acuerdo a la legislación vigente. No descartar los residuos en la tubería de desagüe, cloacas, en ríos, cursos de agua, o junto a los residuos domésticos. La Ficha de Seguridad para Productos Químicos de este producto puede ser obtenida por teléfono. Producto inflamable. Temperatura de ignición del líquido: 421.4°C. Punto de inflamación: 10°C. Conservar alejado de fuentes de ignición – No fumar. **Líquido / Polvo / Glaze / Kit:** Evitar inhalar el polvo, las neblinas y los vapores. Lavarse bien las manos después del manejo. Utilizar cualquier ropa contaminada y lavar antes de volver a usarla. **Líquido / Polvo / Kit:** Puede causar reacciones alérgicas en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La ropa de trabajo contaminada no puede salir del lugar de trabajo. Evite la liberación al medio ambiente. En caso de contacto con la piel: lava abundantemente con agua y jabón. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Recoge el material derramado. **Líquido / Glaze / Kit:** Líquidos y vapores altamente inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, chispa, llama abierta y superficies calientes. – No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Estabiliza el vaso contenedor y el receptor del producto durante transferencias. Utilizar equipamiento eléctrico, de ventilación y de iluminación a la prueba de explosión. Utilizar solamente herramientas que no generen chispas. Evitar el acúmulo de cargas electrostáticas. En caso de contacto con la piel (o el cabello): retira inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuaga la piel con agua o toma una ducha. En caso de inhalación: remueva la persona para un lugar ventilado y la mantiene en reposo en una posición que no obstaculice la respiración. Si la irritación ocular persiste: consulta a un médico. En caso de incendio: para la extinción utilizar polvo químico, dióxido de carbono (CO2), Halon, neblina de agua, o espuma para alcohol. **Polvo / Glaze / Kit:** Puede causar irritación respiratoria. Utilice solamente al aire libre o en lugares bien ventilados. En caso de inhalación: remueva la persona para un lugar ventilado y la mantiene en reposo en una posición que no obstaculice la respiración. Caso se sienta mal, entrar en contacto con un Centro de Información Toxicológica o un médico. **Líquido / Kit:** Causa irritación de la piel. Se sospecha que perjudica la fertilidad o para el feto. Obtener instrucciones específicas antes de su uso. No manipule el producto antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. En caso de exposición o sospecha de exposición: Consulta un médico. **Glaze / Kit:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar somnolencia o mareos. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Almacenamiento: **Polvo:** Almacenar el producto en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo protección de la luz solar. **Líquido / Kit / Glaze:** Almacenar el producto en local seco, fresco, bien ventilado y bajo protección de la luz solar. No almacenar en temperaturas superiores a 30°C (86°F).

Composición: Polvo transparente: Polimetacrilato. Polvo rosa: Polimetacrilato y pigmentos. Líquido: Metacrilatos, plastificante y iniciador. Glaze: Polimetacrilato, acetato de etilo y esencia.

Accesorio: Medidores.

Presentación:

Código	Contenido	Código	Contenido
0012303404	Kit Soft Rebase 30g - Rosa	0012303416	Kit Soft Rebase 120g - Rosa
0012303405	Kit Soft Rebase 30g - Incolore	0012303417	Kit Soft Rebase 120g - Incolore

Soft Rebase


Soft Rebase TDV is a soft self-curing acrylic resin for temporary relining, which allows the patient more adaptation time to the full denture. Its formulation allows the maintenance of the soft state for up to 9 months protecting the patient in sensitive areas. For intraoral and extraoral application because the polymerization does not generate heat and the monomer does not cause irritation in the oral mucosa. Soft Rebase TDV meets the requirements of ISO 2795-1, Type 2, Class 1, ensuring high quality results. The product is available in colorless and pink colors. The kit comes with Glaze and measuring cup. Glaze is suitable for waterproofing, brightening and protecting the acrylic against pigmentation and impregnation of bacteria. Glaze: Indicated for waterproofing of the resin, promoting brightness and protection against pigmentation and accumulation of bacteria, since it seals the porous surface of the pieces.

Indication: Indicated for relining of total and removable partial dentures, functional molding, relining of plaques and orthodontic appliances and creation of artificial gingiva in implant models. It absorbs the masticatory load over the total or partial prosthesis, which generates less tension on the hard base of the prosthesis and avoids localized areas of tension concentration on the alveolar ridge. Soft Rebase TDV is also indicated for relining surgical areas in tissue reconditioning, post implants and surgeries, with the objective of greater protection of these tissues. However, for surgical areas that requires greater care of the tissues and implants it is recommended to use the TDV Soft Provisional.

Use: Soft denture, plaques and orthodontic braces rebasing - Preparation: Proceed with an induced relief of the denture to be rebased, removing approximately 1.5mm of resin, with the help of low rotation finishing device drills. Clean and dry the piece. For extraoral procedures, occlusal and labial surfaces, interproximal areas and occlusal surfaces of teeth and any opposing partial or resin denture with insulation. Do not apply coating between 3mm (1/8 inch) of the peripheral border. **Resin Mixing:** Shake the powder bottle before use. First place the liquid in the Dappen dish, then add the powder. Mix with a spatula for 30 seconds, avoiding the formation of bubbles. (It is recommended to use the spatula #36). Wait for the plastic stang to be annihilated to the part.

Application in prosthesis: Spread Soft Rebase TdV resin over the area to be covered. Insert the prosthesis onto patient's mouth and ask him to close his mouth gently until occlusion. Wait 3 minutes and ask the patient to move the lips and maxillae in order to obtain a muscular adaptation in the peripheral area. Remove the prosthesis from patient's mouth and rinse it with cold water. Remove excess material using scalpel or dental burrs. Insert the prosthesis onto patient's mouth and ask him to firmly close the mouth in occlusion, hold this position steady for 5 minutes. Remove the prosthesis from patient's mouth and rinse it with cold water. **Application in plaques and orthodontic braces:** Spread Soft Rebase TdV resin over the area to be covered. Insert the piece onto patient's mouth, keeping the piece in steady position for 4 minutes. Remove it from the patient's mouth and rinse it with cold water. Remove material residues. **Finishing and polishing:** After completion of the polymerization, proceed the finishing in the conventional way. It is recommended to use a tungsten drill bit and then a sandpaper disc to smooth the surface. Clean the part with water and detergent and dry the entire surface using oil - free compressed air. Carry out the polishing fashion with the assistance of a polishing paste or abrasive rubbers. Apply two to three layers of glaze on the piece. Wait for 2 to 3 minutes. Wash the piece with water and detergent. In case of complete or partial prosthesis, do not pass the glaze over other parts of the denture other than the rebasing material. **Gingival mask under implant-assisted prosthesis molding - Preparation and mixing:** Place the implants into the molding transfer. Isolate the molding material around the implants. Shake the powder bottle before use. First place the liquid in the Dappen cup, then add the powder, gradually. The proportion of Soft Rebase TdV resin components is 2 parts powder to 1 part liquid (v/v). Mix it for 30 seconds in maximum , avoiding the formation of bubbles (it is recommended to use the spatula n° 36). Wait for the plastic stage to be applied. **Application:** Spread Soft Rebase TdV resin over the implant area. Shape it with a spatula assisted the monomer. Wait for 3 minutes in order to pour the plaster. **For functional moldings:** Shake the powder bottle before use. First place the liquid in the Dappen cup, then add the powder, gradually. The proportion of Soft Rebase TdV resin components is 2 parts powder to 1 part liquid (v/v). Mix it for 30 seconds in maximum, avoiding the formation of bubbles (it is recommended to use the spatula n°36). Wait for the plastic stage to be applied. Apply the resin to the customized tray keeping an uniform thickness. Bring the tray to the mouth and proceed with the functional molding technique. **Reassembly of surgical areas in tissue reconditioning - Preparation:** Make an internal prosthesis relief, compatible with the operated region. An additional relief (margin of safety) of 3 to 5 mm is suggested for greater tissue protection. **Mixing and Application:** Proceed according to guidelines for general prosthesis relining. **Glaze:** After finishing the surface, apply two to three layers of glaze over the rebased area. Wait for 2 to 3 minutes. Rinse before use. In the case of complete or partial dentures, do not pass the glaze over the thermoplastic resin or other self-curing ones.

Warnings, precautions and restrictions:

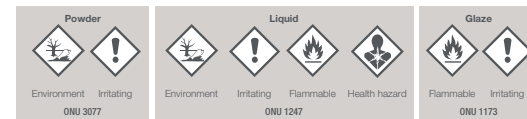

DANGER / WARNING

For dental use only. Professional use. Handle the product in a ventilated place, using a spatula, protective clothing, disposable gloves, goggles and a mask. The product is recommended to be handled at room temperature (20°C to 25°C). Follow the usual procedures for microbiological control during handling. Containers, instruments and hands must be free of contaminants in order to avoid contamination of the parts and the patient with micro-organisms. Containers, instruments, parts and hands must be free of wax or grease in order to provide an adequate chemical bond between the resins. Follow the instructions for use to avoid monomer residue on the manufactured part, color change, wear and tear or breakage. The failure in complying with the instructions for use may affect product performance. Glaze pigmentation may occur in smokers. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. The product handling is not recommended for pregnant and lactating women. Do not reuse containers. Store in a locked place.

Resin: It may produce flammable air / powder mists. **Disposal:** Waste material, content and container must be disposed in an industrial or sanitary landfill according to local legislation enforcement. Do not dispose the captioned waste in sewers, waterways or regular household waste. The Chemical Products Safety Data Sheet for such product may be requested by phone. Flammable product. Ignition temperature of the liquid: 421.4°C. Flash point: 10°C. Keep away from any sources of ignition - Do not smoke. **Liquid / Powder / Glaze / Kit:** Avoid inhaling dust, vapors and mists. Wash hands thoroughly after handling. Remove all contaminated clothing and wash before its reuse. **Liquid / Powder / Kit:** May cause allergic skin reactions. Toxic to aquatic organisms with long lasting effects. Contaminated clothing must not leave from its workplace. Avoid release to the environment. In case of contact with skin: Wash with plenty of soap and water. In case of skin irritation or rash: Get medical advice / attention. Put away the spilled material. **Liquid / Glaze / Kit:** Highly flammable liquids and vapors. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, naked flames and hot surfaces. - Do not smoke. Keep container tightly closed. Proceed with grounding on containers and product receiver during shipment. Use explosion-proof electrical, ventilation, and lighting equipment. Only use anti-sparking tools. Avoid the accumulation of electrostatic charges. In case of contact with skin (or hair): Immediately remove all contaminated clothing. Rinse skin with water or take a shower. In case of inhalation: Remove the person to a ventilated area and keep at rest in a comfortable breathing position. If eye irritation persists: Search for medical advice. In case of fire: For extinguishing it use chemical powder, carbon dioxide (CO2), Halon, water mist, or alcohol foam. **Powder / Glaze / Kit:** May cause irritation of the respiratory tract. Use only outdoors or in a well-ventilated area. In case of inhalation: Remove the person to a ventilated area and keep at rest in a comfortable breathing position. If you feel unwell, please contact a Toxicological Information Center or a doctor. **Liquid / Kit:** Causes skin irritation. Suspected of damaging fertility or fetus. Obtain specific instructions before use. Do not handle the product until you have read and understood all safety precautions. In case of exposure or suspected exposure: Search for medical advice. **Glaze / Kit:** May be harmful if swallowed. May cause drowsiness or dizziness. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Storage: Powder: To be stored in a cool and dry place, protected from sunlight. **Liquid / Kit / Glaze:** To be stored in a cool and dry place, protected from sunlight. Do not store the product in temperature above 30°C (86°F).

Composition: Powder colorless: Polymethacrylate. Powder pink: Polymethacrylate and pigments. Liquid: Methacrylates, plasticizer and initiator. Glaze: Polymethacrylate, ethyl acetate and essence.

Accessory: Measuring devices

Presentation:			
Code	Content	Code	Content
0012303412	Kit Soft Rebase 30g - Pink	0012303416	Kit Soft Rebase 120g - Pink
0012303413	Kit Soft Rebase 30g - Colorless	0012303417	Kit Soft Rebase 120g - Colorless

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | Pomerode/SC - Brasil
CEP 89107-000 | Reg. ANVISA 10291220062
☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
✉ info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



PT/ES: Dispositivo Médico
EN: Medical Device